

弾性ストッキングのお手入れ方法

長くお使いいただくために

 水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。



漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。



直射日光を避け、陰干しにすること。乾燥機を使用する場合には、60℃以下で使用するこ。



アイロンがけはしないでください。



ドライクリーニングはしないでください。

ご注意：洗濯を他のものと同時にする場合には、色落ちのおそれがあるためご注意ください。

ジョブスト ファローラップのお手入れ方法

長くお使いいただくために

ご注意 面ファスナーにごみが付着すると粘着力が弱くなるため、面ファスナーを留めた状態で洗濯してください。
(ファローラップ ライト・ファローラップ ストロング・ファローキック)



水または30度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、洗濯機で洗う場合には洗濯ネットをご使用ください。



漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。



タンブル乾燥しないでください。



できれば平干ししてください。



アイロンがけはしないでください。



ドライクリーニングはしないでください。

(ファローラップ クラシック)



水または40度以下のぬるま湯に市販の中性洗剤を溶かし、手洗いしてください。



漂白剤および柔軟剤のご使用は避けてください。



タンブル乾燥しないでください。



できれば平干ししてください。



アイロンがけはしないでください。



ドライクリーニングはしないでください。

お取り扱いと保管について

- 本品は繊維製品です。次のような場合には破損することがありますので、ご注意ください。
 - ①強く引き伸ばしての装着
 - ②鋭利なものへの接触
- 繊維が傷つくこともあるので面ファスナーの付け外しはゆっくりと丁寧に行ってください。
- 面ファスナーが思わぬところに付着しての破損または劣化予防のため、保管の際は面ファスナーを留めた状態にしてください。

バンデージのお手入れ方法

長くお使いいただくために


弾性包帯やコットン素材の筒状包帯などは、直接皮膚にふれ、汗を吸い込むものですから、こまめに洗って清潔にしておくよう心掛けてください。

※弾性包帯とコットン素材の包帯では、取扱いが異なりますので、ご注意ください。

弾性包帯

洗濯は香料の少ないせっけん洗剤などをお使いになるようおすすめします。基本的には押し洗いをしますが、ネットに入れて、洗濯機で洗うこともできます。弾性包帯は、汚れや体内からの皮脂や塩分が繊維に入り込むと、伸縮性が低下し、劣化しやすいため、1週間に1回、多くて2～3回くらいの頻度で洗濯してください。*

禁止:弾性繊維の劣化の原因になりますので、以下の取扱いは避けてください。

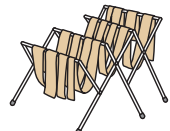

コットン・ウレタン素材包帯

洗濯機で洗う場合は、劣化を防ぐため、必ずネットに入れてください。

コットン素材の包帯、ウレタンからつくられるスポンジ類は、柔軟剤を使うことができます。

禁止:素材をいためますので、以下の取扱いは避けてください。

干す際には、一箇所に圧が加わらないように、図のように蛇行させ、包帯の面を平らにして干すようにしてください。直射日光を避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。色の違うものと一緒に、つけ置きや洗濯をしないでください。

*自着性包帯は除く

 **川本産業株式会社**
 大阪市中央区谷町2丁目6番4号
 ●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956
 (10:00～17:00 月～金 ただし祝日を除く)
<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>

 **essity**

 **JOBST**

製品の品番(コードNo)、JANコードは以下のサイトをご参照ください。
ジョブストブランドサイト <https://www.jobst-kawamoto.com/>

記載されている社名、各種名称は、各社の商標または登録商標です。
川本産業株式会社 2026年10月作成
23T616-①SX2406250-1 ③PP2511050-1

JOBST

ウルトラシアー

オパーク

クラシック

ペラパー

フォーメン

ファローラップ

soソフト

ライトウエア

ペラ ライト

ペラ ストロング

バンデージ

医療関係者用

ジョブスト® 製品ラインアップ総合カタログ

2026年10月現在

Our History

JOBSTの歩み 軽やかな暮らしのストーリー

1950年

機械エンジニアであり、発明家でもあったコンラッド・ジョブスト(Conrad Jobst)が、アメリカ・オハイオ州トレドでJOBST社を設立しました。ドイツ生まれのコンラッドは、自身の専門知識と静脈疾患に苦しんだ自身の経験を融合させ、静脈不全の症状を緩和する「段階的着圧(グラディエント・コンプレッション)衣類」を開発しました。

1953年

ヨーロッパにおけるJOBSTの前身であるVARITEX(ヴァリテックス)ドイツ社が、ドイツのライン川下流域のエメリッヒに設立され、静脈学・リンパ学の専門家との協働を開始しました。当時、最初の弾性ストッキングは手動の機械で編まれていました。同社は設立当初から、大手のリンパ学・静脈学専門クリニックと緊密に連携。治療上のニーズや一人ひとりの患者様の要望に応じ、量産品からオーダーメイドまで、高品質な平編み(フラットニット)ストッキングを開発していきました。

1957年

コンラッドの他界後、妻のキャロライン・ジョブスト(Caroline Jobst)が事業を引き継ぎ、さらなる成長へと導きました。彼女の優れたリーダーシップのもと、製品ラインは既製品(レディ・トゥ・ウェア)の着圧衣類をはじめ、一般向けサポートストッキング、整形外科・形成外科用衣類、抗血栓ストッキングへと拡大。「品質のJOBST」としての名声が高まるにつれ、その販売網は瞬く間に世界各地へと広がっていきました。

1983年

ドイツ・ハンブルクのバイヤスドルフ(Beiersdorf AG)社が、VARITEX社を買収しました。

1990年

バイヤスドルフ社が、アメリカのJOBST USA社を買収しました。

1992年

Varitex社は、JOBSTドイツ(JOBST Germany)社へと社名を変更しました。

2001年

JOBSTドイツ社とJOBST USA社は、ハンブルクのバイヤスドルフ社とロンドンに上場するスミス・アンド・ネフュー(Smith & Nephew plc)社の医療部門による合併会社である「BSNメディカル(BSN Medical)」の系列会社となりました。これに伴い、会社名はBSN-JOBSTへと変更されました。

2004年

JOBSTドイツ社は、BSN-JOBST GmbHへと社名を変更しました。

2006年

BSNメディカル社は、ヨーロッパの中堅市場をリードする大手プライベート・エクイティ投資会社であるモンタギュー・プライベート・エクイティ(Montagu Private Equity)によって買収されました。

2012年

同社は、北欧をリードする大手プライベート・エクイティ・グループであり、約18億ユーロの資金を運用するEQT VIIによって買収されました。

2017年

BSNメディカル社は、スウェーデンのエシティ(Essity AB:旧SCA)社によって買収されました。エシティ社は、パーソナルケア(ベビー・フェミニンケア、軽失禁用品、メディカル・ソリューション)、コンシューマー・ティッシュ、プロフェッショナル向け衛生用品を世界規模で展開する、衛生・ヘルスケア企業です。このエシティの持つインコンチネンス(失禁)ケア部門と、BSNメディカル社の持つジョブストを統合し、ヘルス&メディカル・ソリューションズ(HMS)事業部として新たにスタートしました。

エシティ社は「優れた衛生・ヘルスケアのソリューションを通じて、人々のより良い暮らしの実現に貢献すること」をビジョンに掲げています。HMSは「お客様、患者様、そしてケアを担うすべての人々が、健康で活動的な生活を送れるよう、製品とソリューションを通じて支える」という一つのビジョンのもとに団結しています。

Innovation and quality

ゆるぎない品質と革新性への挑戦

1950年、自身も静脈疾患に苦しんでいた創業者コンラッド・ジョブスト(Conrad Jobst)によって設立されて以来、JOBSTは静脈疾患やリンパ浮腫などの浮腫(むくみ)に関連する症状を抱える方々のQOL(生活の質)向上に、常に全力で取り組んできました。

私たちが追求するゆるぎない品質は、世界水準の認証機関によって証明されています。ドイツの厳格な「RAL認証」を満たすことで、正確な圧迫コントロールと耐久性、そして安定性のある形状を実現しました。また、米国FDA(食品医薬品局)の承認はJOBST製品が単なる衣服ではなく、科学的に有効性が検証された「医療機器」であることの証明です。私たちエシティ社は、この確かな品質を通じて、医療従事者の皆様と患者様の双方に最大限ご満足いただけるよう、これからも尽力してまいります。



快適さと確かな実感をあなたの日々に

私たちJOBSTは、長年培ってきた医学的知見と豊富な経験、そして患者様一人ひとりの悩みに深く寄り添うことで、リンパ浮腫や脂肪浮腫、静脈疾患のための圧迫療法(コンプレッションセラピー)製品をお届けしています。

私たちが最も大切にしているのは、あなただけの「心地よさ」です。JOBSTの弾性衣類は、あなたらしくアクティブな毎日を楽しめるよう、一人ひとりに最適なソリューションをご提案します。



※米国特許取得(JOBST SoftFit:第9,358,172号、第9,345,271号/JOBST Sensitive:第10,428,447号)

例えば JOBST SoftFit - 毎日の暮らしを もっと心地よく -

独自の「JOBST SoftFit テクノロジー」を採用した弾性ストッキングは、ひざ下(履き口)のバンド部分に極細のシリコーン糸を編み込んでいます。これにより、お肌への圧迫感を抑えながら、安定した着有感を保ち、不快なズレ落ちを和らげます。締め付け感から解放され、より優しく快適な履き心地へ。「JOBST SoftFit」のトップバンドが、あなたの毎日を新しい快適さへと導きます。

独自の「JOBST SoftFit テクノロジー」は、目的に合わせて選べる多彩な製品をご用意しています。デイリーユースに適した弾性ストッキングとして、JOBST UltraSheer(ウルトラシアアー)、JOBST forMen(フォーメン)など、毎日の生活を快適にサポートする製品を展開しています。これらすべての製品に、ワンランク上の快適さを届ける独自の「JOBST SoftFit テクノロジー」が使用されています。

JOBSTはこれからも、多くの先進的なテクノロジーで、妥協のない快適性と確かなサポート力を提供し、あなたの健やかな暮らしを支え続けます。

JOBST品種一覧表

ショート
ストレッチ

伸びにくい

よく伸びる

ロング
ストレッチ

圧迫圧 15mmHg ~20mmHg~ ~30mmHg~ ~40mmHg~


軽度圧迫圧 (20mmHg未満)

弱圧 (20~29mmHg)

中圧 (30~39mmHg)

強圧 (40mmHg以上)


ショートストレッチ タイプ着用時

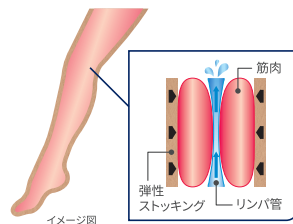

ショートストレッチタイプでは、高いポンプ機能を確認し、筋肉が動く時の血管やリンパ管にかかる圧力を高めるように、弾力性繊維と独自の編み方によって伸びにくい生地を採用しています。

※参考文献：平井正文 著 (2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基本と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P58

ロングストレッチ タイプ着用時

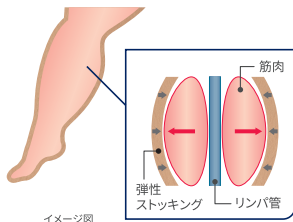

ロングストレッチタイプでは、筋肉の動きに合わせて生地が伸びるため、ポンプ機能は低くなりますが、よく伸びることにより、フィット感にすぐ履きやすく動きやすいという特長があります。


※参考文献：平井正文 著 (2013) データとケースレポートから見た圧迫療法の基本と臨床 [第1版第1刷] 株式会社メディカルトリビューン P39

ショートストレッチタイプの履き方・脱ぎ方

はじめに

- ・ たぐらないでください。履きづらくなります。
- ・ 必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。
- ・ ゴム手袋を着用してください。


履き方

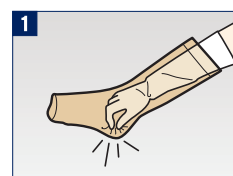

ストッキングの中に手を入れ、親指と人差し指でストッキングのかかと部をつまみます。




ストッキングを丸めないように徐々に裏返していきます。かかと部をつまんだまま、ストッキングを裏返します。

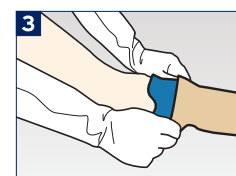

つま先なしの場合はフットスリップを履き、裏返したストッキングの内側を両手で広げ、つま先を奥に入れます。



次にかかとまで履きます。ストッキングを束にしなないことが着用時のコツです。

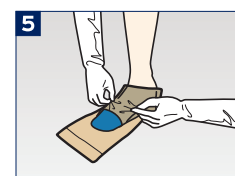

かかとが正しく収まっていることを確認し、足首までしっかりと入れます。



十分伸ばしながら少しずつたくし上げ、生地を皮膚に置いていくように着用します。フットスリップを抜き取ります。



生地が一箇所にたまるないようにしながら、ねじれ・たるみ・しわに注意しつつ、着用します。



最後に全体をなでて整え、踵部が正しい位置に収まっていることを確認します。

脱ぎ方




履いたときと逆の手順で、ストッキングの裏地をつかむようにして、段階的に引き下げます。

ロングストレッチタイプの履き方・脱ぎ方


はじめに

- ・ たぐらないでください。履きづらくなります。
- ・ 必ず座って履いてください。立ちながら履くと、転倒するおそれがあります。


履き方

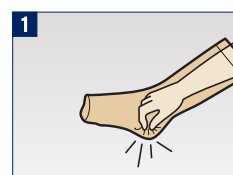


ストッキングの中に手を入れ、かかとの部分を内側から軽くつまみます。

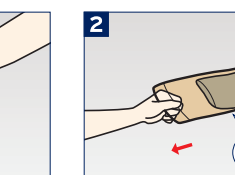

ストッキングを丸めないように裏返していきます。

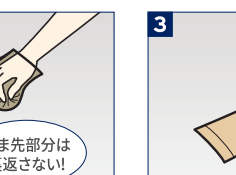


つまんだかかと部分まで裏返します。

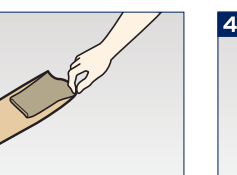

つま先なしの場合はフットスリップを履きます。




つま先を奥に入れかかとまで履きます。

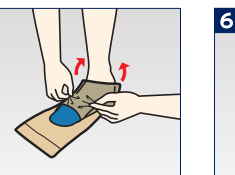


かかとの少し上を持ち、足首まで履きます。



ねじれ・たるみ・しわに注意しながら、少しずつたくしあげます。

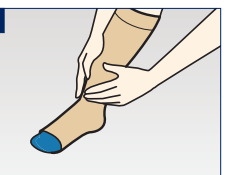

最後に全体をなでて整えます。

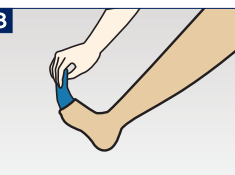


つま先の空いている部分からフットスリップを抜き取ります。

着用時のコツ

着脱の際は生地を束にしない

一般のストッキングのように弾性ストッキングを何重にも束ねると、硬く、伸びにくくなるため、着用できません。

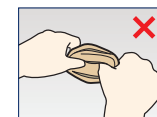


縦ではなく、横に引っ張りながら、着用する

弾性ストッキングはその名の通り、伸びるストッキングです。縦に引っ張りながら着用すると、膝の上まで生地がきてしまいます。



〈ハイソックスタイプの例〉

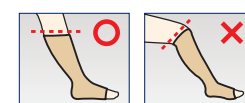


膝上まで生地がきている

脱ぎ方




ストッキングの生地を一枚持ち、足首まで脱ぎます。

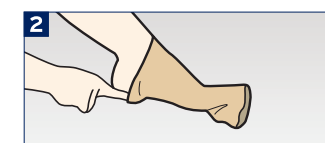

足首部まで脱げたら指を入れ、かかとを乗り越えます。



生地は束にせず、引っ張りながらつま先部分を脱ぎます。

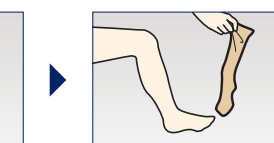

新しいパッケージに移行します



世界共通パッケージ その信頼を日本にお届けします



弾性ストッキング

ジョブスト ウルトラシアー20・30

20	20-27hPa (15-20mmHg)	30	27-40hPa (20-30mmHg)
-----------	----------------------	-----------	----------------------

数値は足首部の圧迫圧です。

段階的圧迫により血液還流を促進すると共に、
フィット感、ファッション性を向上させた「弾性ストッキング」

- ・高い通気性、素肌のようなフィット感のある履き心地です。
- ・圧迫力はそのままだに、履きやすさを大幅に向上しました。
- ・弾力性のみならず、耐久性のある繊維を使用することでより長くご愛用いただけます。

静脈還流障害、血管の浮きなどに

通気性が良く、快適な履き心地

透明度が高く、ファッショナブル

ハイソックスは「ショート」「レギュラー」をご用意
膝下の長さが38cm未満の方には「ショート」38cmより長い方には「レギュラー」
より適切に装着いただくため 膝下長に応じた2種類の丈からお選びいただけます

ジョブスト ウルトラシアー20 品種表

タイプ		ハイソックス ショート	ハイソックス レギュラー			ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコンリップ付ドット	ストッキング センシティブグリップ	パンティ ストッキング	マタニティ
つま先タイプ		つま先あり	つま先あり	つま先なし		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	つま先あり
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
	S	JP-U20KSS1	JP-U20KSS	JP-U21KSS	JP-U20KSSF	JP-U21TSS	JP-U20TSSV	JP-U20WSS	JP-U20MSS	
	M	JP-U20KMS1	JP-U20KMS	JP-U21KMS	JP-U20KMFS	JP-U21TMS	JP-U20TMSV	JP-U20WMS	JP-U20MMS	
	L	JP-U20KLS1	JP-U20KLS	JP-U21KLS	JP-U20KLFS	JP-U21TLS	JP-U20TLVS	JP-U20WLS	JP-U20MLS	
	XL	JP-U20KXS1	JP-U20KXS	JP-U21KXS	JP-U20KXSF	JP-U21TXS	JP-U20TXSV			
	S	JP-U20KSB1	JP-U20KSB	JP-U21KSB	JP-U20KSBF	JP-U21TSB	JP-U20TSBV	JP-U20WSB		
	M	JP-U20KMB1	JP-U20KMB	JP-U21KMB	JP-U20KMBF	JP-U21TMB	JP-U20TMBV	JP-U20WMB		
	L	JP-U20KLB1	JP-U20KLB	JP-U21KLB	JP-U20KLBF	JP-U21TLB	JP-U20TLBV	JP-U20WLB		
	XL	JP-U20KXB1	JP-U20KXB	JP-U21KXB	JP-U20KXBF	JP-U21TXB	JP-U20TXBV			
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,280 (¥4,800) 1足(2本)	¥5,280 (¥4,800) 1足(2本)	¥5,500 (¥5,000) 1足(2本)	¥5,500 (¥5,000) 1足(2本)	¥6,600 (¥6,000) 1足(2本)	¥6,600 (¥6,000) 1足(2本)	¥7,040 (¥6,400) 1足	¥11,770 (¥10,700) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ウルトラシアー 医療機器届出番号:27B1X00006650302

ジョブスト ウルトラシアー30 品種表

										
タイプ		ハイソックス ショート		ハイソックス レギュラー		ハイソックス ソフトフィット	ストッキング シリコングリップ付ドット	ストッキング センシティブグリップ	パンティ ストッキング	マタニティ
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	つま先あり
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
シルキー ベージュ	S	JP-U30KSS1	JP-U31KSS1	JP-U30KSS	JP-U31KSS	JP-U30KSSF	JP-U31TSS	JP-U30TSSV	JP-U30WSS	JP-U30MSS
	M	JP-U30KMS1	JP-U31KMS1	JP-U30KMS	JP-U31KMS	JP-U30KMSF	JP-U31TMS	JP-U30TMSV	JP-U30WMS	JP-U30MMS
	L	JP-U30KLS1	JP-U31KLS1	JP-U30KLS	JP-U31KLS	JP-U30KLSF	JP-U31TLS	JP-U30TLSV	JP-U30WLS	JP-U30MLS
	XL	JP-U30KXS1	JP-U31KXS1	JP-U30KXS	JP-U31KXS	JP-U30KXSF	JP-U31TXS	JP-U30TXSV		
ブラック	S	JP-U30KSB1	JP-U31KSB1	JP-U30KSB	JP-U31KSB	JP-U30KSBF	JP-U31TSB	JP-U30TSBV		
	M	JP-U30KMB1	JP-U31KMB1	JP-U30KMB	JP-U31KMB	JP-U30KMBF	JP-U31TMB	JP-U30TMBV		
	L	JP-U30KLB1	JP-U31KLB1	JP-U30KLB	JP-U31KLB	JP-U30KLBF	JP-U31TLB	JP-U30TLBV		
	XL	JP-U30KXB1	JP-U31KXB1	JP-U30KXB	JP-U31KXB	JP-U30KXBF	JP-U31TXB	JP-U30TXBV		
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥7,150 (¥6,500)		¥7,150 (¥6,500)		¥7,150 (¥6,500)	¥8,140 (¥7,400)	¥8,140 (¥7,400)	¥8,690 (¥7,900)	¥12,540 (¥11,400)
		1足(2本)		1足(2本)		1足(2本)	1足(2本)	1足(2本)	1足	1足

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ウルトラシアー 医療機器届出番号:27B1X00006650302

弾性ストッキング

ジョブスト ウルトラシアー C

30	27-40hPa (20-30mmHg)
----	----------------------

数値は足首部の圧迫圧です。

ウルトラシアー20・30とは生地が異なるシアータイプ

- ・履き心地を重視した生地を使用。
- ・全てつま先なしタイプとなっているため、すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付きです。

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ウルトラシアー 医療機器届出番号:27B1X00006650302

ハイソックス ソフトフィット

着用中の不快感の低減を目指した新コンセプトのハイソックス

- ・膝バンド部における締めつけの緩和とすべり止め効果を両立させるため、グリップ力に優れた素材を採用しました。
- ・皮膚への跡のこりやハイソックスのずり落ちなど、着用中の不快感を低減させるための設計です。

※シリコンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだメッシュ生地を膝バンド部内側に採用

ストッキング センシティブグリップ

バンド部の皮膚トラブル低減を目指した
新仕様のシリコングリップ「センシティブグリップ」



- ・「センシティブグリップ」は、生地表面をシリコンコーティングするのではなく、細い シリコン糸を生地に織り込み、バンド全体で皮膚をソフトにグリップする設計です。
- ・通気性・水分蒸散性が高くなるような設計(布地構造等)により、汗やムレなどによる皮膚トラブルの低減に貢献します。
- ・皮膚への刺激を低減するため、シリコンと皮膚の接触面積を小さくしています。

※シリコーンで覆われている生地面積
ドットタイプ 30%、センシティブグリップ 9.4% (自社比較データ)

ストッキング シリコングリップ付ドット

ずり落ち防止機能付き

- ・大腿部がずりおちるといふ不快感を解消しました。
- ・皮膚刺激性の少ないシリコンゴムを使用しました。

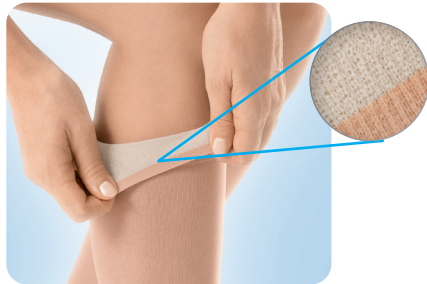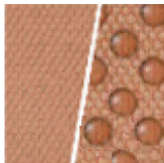

採寸表 ウルトラシアー20 30


		適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
サイズ		S	M	L	XL	
ヒップ(H)	パンティストッキング	71-117	76-127	81-137	—	
	マタニティ	81-132	86-142	91-152	—	
大腿部(G)		40-62	46-70	54-78	60-81	
ふくらはぎ(C)		28-38	30-42	32-46	34-50	
足首(B)		18-21	21-25	25-29	29-33	

＜適用股長＞ ハイソックス 膝下の長さ(LD):レギュラータイプ>38cm、ショートタイプ≤38cm
ストッキング 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5cm

採寸表 ウルトラシアーC

	適用周囲長				サイズ記入欄
サイズ	S	M	ML	L	
大腿部(G)	45-62	49-67	53-72	56-77	
大腿中央部(F)	41-56	44-60	47-65	50-69	
腓骨頭(D)	29-36	32-39	34-42	36-45	
ふくらはぎ(C)	30-37	33-40	35-43	37-46	
足首(B)	20-22	22-24	24-26	26-28	

＜適用肢長＞ 大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):ストッキング シリコンなし60-69cm

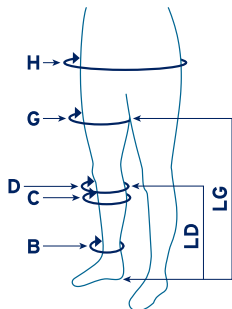



ジョブスト オパーク

弾性ストッキング

ジョブスト オパーク1・2・3

1	24-28hPa(18-21mmHg)	3	45-61hPa(34-46mmHg)
2	31-43hPa(23-32mmHg)		

数値は足首部の圧迫圧です。

履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求。

- ・ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用
- ・柔らかく、やや厚手の生地を採用

ジョブスト オパーク1 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング	
つま先タイプ		つま先あり		つま先なし		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
ページュ	SS	JP-Q10K1S	JP-Q11K1S	JP-Q10T1S	JP-Q11T1S	JP-Q10W1S	JP-Q11W1S
	S	JP-Q10K2S	JP-Q11K2S	JP-Q10T2S	JP-Q11T2S	JP-Q10W2S	JP-Q11W2S
	M	JP-Q10K3S	JP-Q11K3S	JP-Q10T3S	JP-Q11T3S	JP-Q10W3S	JP-Q11W3S
	L	JP-Q10K4S	JP-Q11K4S	JP-Q10T4S	JP-Q11T4S	JP-Q10W4S	JP-Q11W4S
	2L	JP-Q10K5S	JP-Q11K5S	JP-Q10T5S	JP-Q11T5S	JP-Q10W5S	JP-Q11W5S
	3L	JP-Q10K6S	JP-Q11K6S	JP-Q10T6S	JP-Q11T6S	JP-Q10W6S	JP-Q11W6S
ブラック	SS	JP-Q10K1B	JP-Q11K1B	JP-Q10T1B	JP-Q11T1B	JP-Q10W1B	JP-Q11W1B
	S	JP-Q10K2B	JP-Q11K2B	JP-Q10T2B	JP-Q11T2B	JP-Q10W2B	JP-Q11W2B
	M	JP-Q10K3B	JP-Q11K3B	JP-Q10T3B	JP-Q11T3B	JP-Q10W3B	JP-Q11W3B
	L	JP-Q10K4B	JP-Q11K4B	JP-Q10T4B	JP-Q11T4B	JP-Q10W4B	JP-Q11W4B
	2L	JP-Q10K5B	JP-Q11K5B	JP-Q10T5B	JP-Q11T5B	JP-Q10W5B	JP-Q11W5B
	3L	JP-Q10K6B	JP-Q11K6B	JP-Q10T6B	JP-Q11T6B	JP-Q10W6B	JP-Q11W6B
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥7,590 (¥6,900) 1足(2本)		¥16,060 (¥14,600) 1足(2本)		¥26,400 (¥24,000) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

ジョブスト オパーク2 品種表

タイプ		ハイソックス		ストッキング シリコングリップ付ドット		パンティストッキング		片足ストッキング	
つま先タイプ		つま先あり		つま先なし		つま先なし		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
ページュ	SS	JP-Q20K1S	JP-Q21K1S	JP-Q20T1S	JP-Q21T1S	JP-Q20W1S	JP-Q21W1S	JP-Q21G1SL	JP-Q21G1SR
	S	JP-Q20K2S	JP-Q21K2S	JP-Q20T2S	JP-Q21T2S	JP-Q20W2S	JP-Q21W2S	JP-Q21G2SL	JP-Q21G2SR
	M	JP-Q20K3S	JP-Q21K3S	JP-Q20T3S	JP-Q21T3S	JP-Q20W3S	JP-Q21W3S	JP-Q21G3SL	JP-Q21G3SR
	L	JP-Q20K4S	JP-Q21K4S	JP-Q20T4S	JP-Q21T4S	JP-Q20W4S	JP-Q21W4S	JP-Q21G4SL	JP-Q21G4SR
	2L	JP-Q20K5S	JP-Q21K5S	JP-Q20T5S	JP-Q21T5S	JP-Q20W5S	JP-Q21W5S	JP-Q21G5SL	JP-Q21G5SR
	3L	JP-Q20K6S	JP-Q21K6S	JP-Q20T6S	JP-Q21T6S	JP-Q20W6S	JP-Q21W6S	JP-Q21G6SL	JP-Q21G6SR
ブラック	SS	JP-Q20K1B	JP-Q21K1B	JP-Q20T1B	JP-Q21T1B	JP-Q20W1B	JP-Q21W1B		
	S	JP-Q20K2B	JP-Q21K2B	JP-Q20T2B	JP-Q21T2B	JP-Q20W2B	JP-Q21W2B		
	M	JP-Q20K3B	JP-Q21K3B	JP-Q20T3B	JP-Q21T3B	JP-Q20W3B	JP-Q21W3B		
	L	JP-Q20K4B	JP-Q21K4B	JP-Q20T4B	JP-Q21T4B	JP-Q20W4B	JP-Q21W4B		
	2L	JP-Q20K5B	JP-Q21K5B	JP-Q20T5B	JP-Q21T5B	JP-Q20W5B	JP-Q21W5B		
	3L	JP-Q20K6B	JP-Q21K6B	JP-Q20T6B	JP-Q21T6B	JP-Q20W6B	JP-Q21W6B		
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥12,540 (¥11,400) 1足(2本)		¥17,600 (¥16,000) 1足(2本)		¥26,400 (¥24,000) 1足		¥15,070 (¥13,700) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

ジョブスト オパーク3 品種表

タイプ		パンティストッキング		ストッキング シリコングリップ付
つま先タイプ		つま先あり		つま先なし
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード
ページュ	SS	JP-Q30W1S	JP-Q31W1S	JP-Q31T1S
	S	JP-Q30W2S	JP-Q31W2S	JP-Q31T2S
	M	JP-Q30W3S	JP-Q31W3S	JP-Q31T3S
	L	JP-Q30W4S	JP-Q31W4S	JP-Q31T4S
	2L	JP-Q30W5S	JP-Q31W5S	JP-Q31T5S
	3L	JP-Q30W6S	JP-Q31W6S	JP-Q31T6S
ブラック	SS	JP-Q30W1B	JP-Q31W1B	
	S	JP-Q30W2B	JP-Q31W2B	
	M	JP-Q30W3B	JP-Q31W3B	
	L	JP-Q30W4B	JP-Q31W4B	
	2L	JP-Q30W5B	JP-Q31W5B	
	3L	JP-Q30W6B	JP-Q31W6B	
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥27,940 (¥25,400) 1足		¥18,810 (¥17,100) 1足(2本)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト オパーク 医療機器届出番号:27B1X00006650905

弾性ストッキング

ジョブスト クラシック3

3	45-61hPa(34-46mmHg)
---	---------------------

数値は足首部の圧迫圧です。

着用しやすさ、動きに追従し適切な圧迫を維持することを目的として伸縮性と回復性のよい糸を採用。

- ・通気性が良くムレにくい

ジョブスト クラシック3 品種表

タイプ		パンティストッキング	
つま先タイプ		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
		左	右
SS	JP-CL31W1S	JP-CL31G1SL	JP-CL31G1SR
S	JP-CL31W2S	JP-CL31G2SL	JP-CL31G2SR
M	JP-CL31W3S	JP-CL31G3SL	JP-CL31G3SR
L	JP-CL31W4S	JP-CL31G4SL	JP-CL31G4SR
2L	JP-CL31W5S	JP-CL31G5SL	JP-CL31G5SR
3L	JP-CL31W6S	JP-CL31G6SL	JP-CL31G6SR
希望小売価格 (本体価格・税別)	¥33,550 (¥30,500) 1足	¥15,070 (¥13,700) 1足	


*片足ストッキングのベルトは左右ペアで装着可能な形状です。

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト クラシック 医療機器届出番号:27B1X00006651106

オパーク・クラシック採寸表

サイズ	適用周囲長						サイズ 記入欄
	SS	S	M	L	2L	3L	
大腿部シリコンバンド(G)	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	
大腿部(G)	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	
大腿中央部(F)	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	
膝蓋骨(E)	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	
腓骨頭(D)	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	
ふくらはぎ(C)	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	
ふくらはぎ下部(B1)	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	
足首(B)	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	
足関節(Y)	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40	
つま先(A)	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34	

<適用肢長> ハイソックス 膝下の長さ(LD):34-39cm、ストッキング 脚の長さ(LG):60-69cm、
パンティストッキング/片足ストッキング 股下の長さ(LK):65-75cm

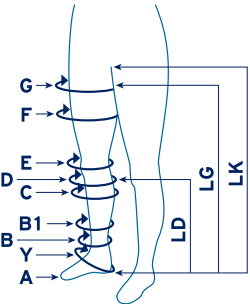

ジョブスト オパーク

ジョブスト クラシック



弾性ストッキング

ジョブスト ベラバー2

2 31-43hPa (23-32mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

リンパ液のうっ滞を軽減・予防するために
必要な圧迫圧が持続。

ジョブスト ベラバー2 品種表


タイプ		ストッキング (シリコンなし)	パニティストッキング	片足ストッキング		片足パニティストッキング	
つま先タイプ		つま先なし	つま先なし	つま先なし		つま先なし	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
				左	右	左	右
	2 (S)	JP-BL2TH2S	JP-BL2WS2S	JP-BL2CS2SL	JP-BL2CS2SR	JP-BL2KS2SL	JP-BL2KS2SR
	3 (M)	JP-BL2TH3S	JP-BL2WS3S	JP-BL2CS3SL	JP-BL2CS3SR	JP-BL2KS3SL	JP-BL2KS3SR
	4 (ML)	JP-BL2TH4S	JP-BL2WS4S	JP-BL2CS4SL	JP-BL2CS4SR	JP-BL2KS4SL	JP-BL2KS4SR
	5 (L)	JP-BL2TH5S	JP-BL2WS5S	JP-BL2CS5SL	JP-BL2CS5SR	JP-BL2KS5SL	JP-BL2KS5SR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥17,600 (¥16,000) 1足(2本)	¥35,970 (¥32,700) 1足	¥15,070 (¥13,700) 1足		¥34,540 (¥31,400) 1足	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラバー 医療機器届出番号:27B1X00006652915

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	2 (S)	3 (M)	4 (ML)	5 (L)	
大腿部 (G)	46ー48	50ー52	54ー56	58ー60	
大腿中央部 (F)	42ー44	45ー47	48ー50	51ー53	
膝蓋骨 (E)	32ー34	35ー37	38ー40	41ー43	
腓骨頭 (D)	29ー31	32ー34	35ー37	38ー40	
ふくらはぎ (C)	31ー33	34ー36	37ー39	40ー42	
ふくらはぎ下部 (B1)	25ー26	27ー28	29ー30	31ー32	
足首 (B)	20ー21	22ー23	24ー25	26ー27	
足関節 (Y)	29ー30	31ー32	33ー34	35ー36	
つま先 (A)	20ー21	22ー23	24ー25	26ー27	

股下の長さ (LK):70ー75cm 大腿部までの長さ (LG):69ー74cm

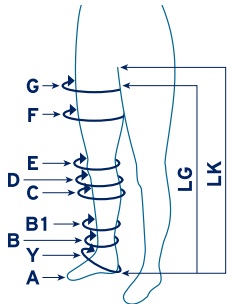

従来のフォーメンアンビション フォーメンについては在庫が一部ございます。
在庫限りとなっていますので、ご入用の際にはお問い合わせをお願いいたします。

弾性ストッキング

ジョブスト フォーメン20・30

20 20-27hPa (15-20mmHg) 30 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

男性の足の形に合わせた形状・サイズ展開

- ・ハイソックスは従来の「つま先あり」に加え「つま先なし」がラインアップに追加
- ・ストッキングは圧迫圧20mmHg がラインアップに追加
滑り止めは「シリコングリップ付きドット」から「マイクロドット」に更新されました




- ・つま先ありは左右の足に沿った形状を採用
- ・靴下底部にはクッション性の高い縫製方法を導入




- ・ニオイを低減する防臭加工された生地を採用

- ・様々な体型に合わせられるよう4サイズをラインアップ
(ストッキングは3サイズ)

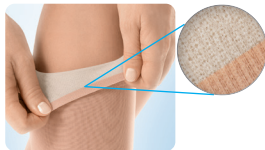

【ハイソックス ソフトフィット】

着用中のバンド部のずり落ちや締め付けを防ぎ、
より適正な圧力勾配を意図した設計
※シリコーンコーティングされた細い糸と弾性糸を編んだ
メッシュ生地を膝バンド部内側に採用

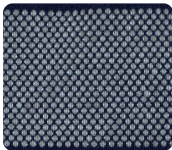

【ストッキング マイクロドット】

マイクロドットバンドは衣類のずり落ちを防ぎながら
肌に跡を残さない快適な着け心地となるよう設計
※全面シリコーン加工を施さないことで通気性を
確保し快適な装着環境を保ちます

		フォーメン20			フォーメン30		
タイプ		ハイソックス ソフトフィット		ストッキング マイクロドット	ハイソックス ソフトフィット		ストッキング マイクロドット
つま先タイプ		つま先あり	つま先なし	つま先あり	つま先あり	つま先なし	つま先あり
カラー	サイズ	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード	製品コード
	S	JP-FM20K2B	JP-FM21K2B	JP-FM20T2B	JP-FM30K2B	JP-FM31K2B	JP-FM30T2B
	M	JP-FM20K3B	JP-FM21K3B	JP-FM20T3B	JP-FM30K3B	JP-FM31K3B	JP-FM30T3B
	L	JP-FM20K4B	JP-FM21K4B	JP-FM20T4B	JP-FM30K4B	JP-FM31K4B	JP-FM30T4B
	XL	JP-FM20K5B	JP-FM21K5B	-	JP-FM30K5B	JP-FM31K5B	-
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥6,490 (¥5,900) 1足(2本)		¥14,300 (¥13,000) 1足(2本)	¥9,020 (¥8,200) 1足(2本)		¥14,960 (¥13,600) 1足(2本)

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト フォーメン 医療機器届出番号:27B1X00006652111

採寸表 ハイソックス


サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	S	M	L	XL	
ふくらはぎ (C)	28ー38	30ー42	32ー46	34ー50	
足首 (B)	18ー21	21ー25	25ー29	29ー33	

採寸表 ストッキング

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ記入欄
	S	M	L	—	
大腿部 (G)	40ー62	46ー70	54ー78	—	
ふくらはぎ (C)	28ー38	30ー42	32ー46	—	
足首 (B)	18ー21	21ー25	25ー29	—	

＜採寸表について＞

- ・サイズの選択は基本的にB(足首)ポイントを優先させてください。
- ・Bポイントの値が2サイズにまたがる場合は、大きいほうのサイズをお選びください。

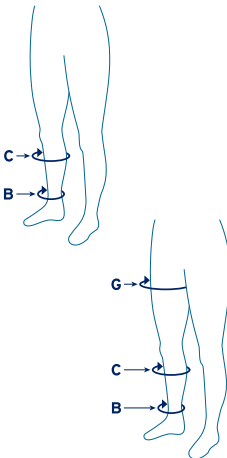

弾性着衣

ジョブスト ファローラップ

1人で巻ける自立度と、手技を選ばない確実な圧迫を追求。

- ・サイズ変化、皮膚トラブル、筋力低下による「履けない」に巻き付けタイプで柔軟に対応。
- ・手技のばらつきを防ぎ、誰が巻いてもしっかりとした圧迫圧が維持できるデザイン。
- ・1人でも着脱しやすく、看護・介助の時間削減が期待できます。

多層包帯と比較して関節の動きを妨げにくい形状になっています。



Easy Donning

巻き付けて面ファスナーで固定するので着脱がしやすい弾性着衣です。



Short Stretch

筋ポンプ作用の増強を目指したショートストレッチ生地を採用しています。




Low Profile Design

洋服の下でもかさ張りにくいデザインです。



Adjustable

面ファスナーで固定するのでご自身で調節が可能です。

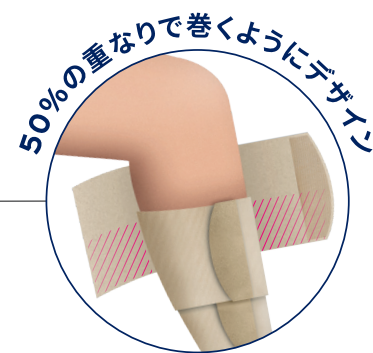

ショートストレッチ弾性包帯による多層包帯法の圧迫を再現するため50%の重なりで巻くようデザインしました。層と層の間に隙間や皮膚の挟まり(くい込み)がなく、全体を圧迫することができます。

巻き付けて装着する製品が便利なケース



サイズが大きく弾性着衣の選択が困難な方、またはくい込みやすく弾性着衣の装着が困難な方



創傷があり、弾性着衣の装着が困難な方



弾性着衣の装着に介助が必要な方

装着部位別に3つのタイプがあります。




フットピース



レッグピース

*ライナー付き

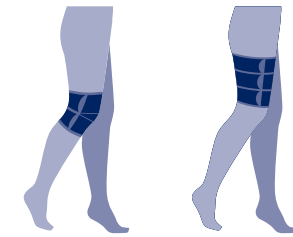

サイピース

ひざ用パーツ 大腿用パーツ

*ライナー付き

2種類の圧迫圧

27hPa~40hPa (20~30mmHg) *足首部の圧迫圧	ライト
40hPa~53hPa (30~40mmHg) *足首部の圧迫圧	ストロング クラシック ファロークイック


部位ごとに分かれており、組み合わせて使用します。

注: サイピースは大腿用パーツとひざ用パーツのセットです。
レッグピースとサイピースにはそれぞれライナーが付属しています。


装着方法

予めライナーを装着します。


フットピースの装着

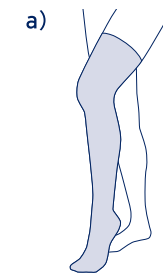


装着部位に応じて、レッグピース付属ライナー、サイピース付属ライナー、ファローハイブリッドライナーのいずれかをご使用ください。

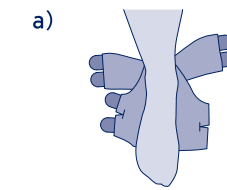


フットピースの穴にかかとを合わせ、装着位置を調整します。

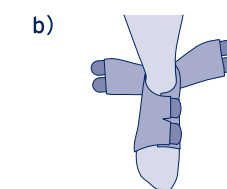

足の部分のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

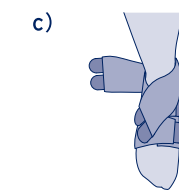


足首側のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

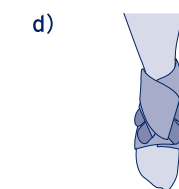


同様にもう1枚のベルトをクロスするように固定し、位置を調整します。


レッグピースの装着

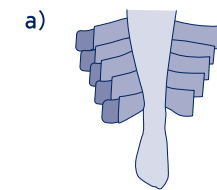

装着位置を確認します。

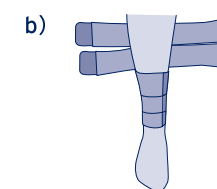


足首側から順番に各ベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

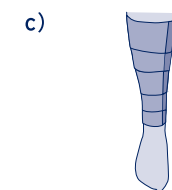


全てのベルトを固定し、しっかり面ファスナーが密着するように全体を押さえます。

サイピースの装着

①大腿用パーツ

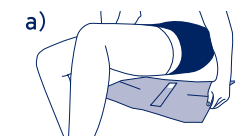

タグが付いている方が大腿付け根側にくるように装着位置を調整します。

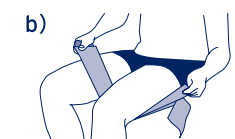


ひざ側のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。




大腿部側のベルトも同様に固定します。


②ひざ用パーツ

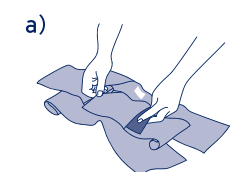

ひざ用パーツのひざ裏に当たる部分にはクッションとしてウレタンシートが入っています。必要に応じて取り外しが可能です。

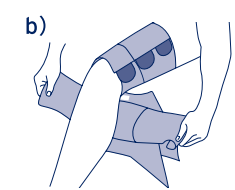

タグが付いている方が大腿部(上)側にくるようにし、膝関節を覆うように中央(内側)のベルトを軽く伸展させながら面ファスナーで固定します。

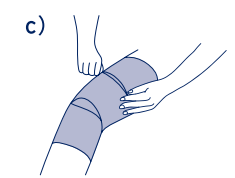

ひざ下側のベルト、ひざ上側のベルトを同様に固定し、位置を調整します。

品 種 表



ジョブスト
ファローラップ
ライト

27～40hPa(20～30mmHg)

- ・ 軽めの圧迫圧
- ・ ファローラップの中で一番薄く柔らかい生地です。




※写真は
ハイブリッドライナーを
着用しています。



フットピース



レッグピース
*ライナー付き

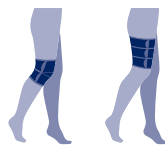

サイピース
ひざ用パーツと大腿用パーツのセットです。
*ライナー付き

27～40hPa(20～30mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWLRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWLRF2			S	
JP-FWLRF3			M	
JP-FWLRF4			L	
JP-FWLRF5			XL	
JP-FWLRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 24,860円 (22,600円)
JP-FWLRK2			S	
JP-FWLRK3			M	
JP-FWLRK4			L	
JP-FWLRK5			XL	
JP-FWLST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWLST2A			S	
JP-FWLST3A			M	
JP-FWLST4A			L	
JP-FWLST5A			XL	
JP-FWLRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWLRT2A			S	
JP-FWLRT3A			M	
JP-FWLRT4A			L	
JP-FWLRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ ライト
医療機器届出番号:27B1X00006651910



ジョブスト
ファローラップ
ストロング

40～53hPa(30～40mmHg)

- ・ 強めの圧迫圧
- ・ 厚さがありしっかりした生地です。




※写真は
ハイブリッドライナーを
着用しています。



フットピース



レッグピース
*ライナー付き

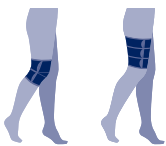

サイピース
ひざ用パーツと大腿用パーツのセットです。
*ライナー付き

40～53hPa(30～40mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWSRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWSRF2			S	
JP-FWSRF3			M	
JP-FWSRF4			L	
JP-FWSRF5			XL	
JP-FWSRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 27,940円 (25,400円)
JP-FWSRK2			S	
JP-FWSRK3			M	
JP-FWSRK4			L	
JP-FWSRK5			XL	
JP-FWSST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWSST2A			S	
JP-FWSST3A			M	
JP-FWSST4A			L	
JP-FWSST5A			XL	
JP-FWSRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWSRT2A			S	
JP-FWSRT3A			M	
JP-FWSRT4A			L	
JP-FWSRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ ストロング
医療機器届出番号:27B1X00006651709



ジョブスト
ファローラップ
クラシック

40～53hPa(30～40mmHg)

- ・ 強めの圧迫圧
- ・ ストロングより硬く、折れにくいいため変形がある下肢にもくい込みにくい生地です。




※写真は
ハイブリッドライナーを
着用しています。



フットピース



レッグピース
*ライナー付き

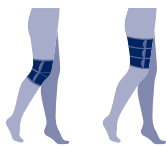

サイピース
ひざ用パーツと大腿用パーツのセットです。
*ライナー付き

40～53hPa(30～40mmHg) ※足首部				
製品コード	タイプ	長さ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FWCRF1	フットピース	レギュラー	XS	1個 13,970円 (12,700円)
JP-FWCRF2			S	
JP-FWCRF3			M	
JP-FWCRF4			L	
JP-FWCRF5			XL	
JP-FWCRK1	レッグピース	レギュラー	XS	1個 27,940円 (25,400円)
JP-FWCRK2			S	
JP-FWCRK3			M	
JP-FWCRK4			L	
JP-FWCRK5			XL	
JP-FWCST1A	サイピース	ショート	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWCST2A			S	
JP-FWCST3A			M	
JP-FWCST4A			L	
JP-FWCST5A			XL	
JP-FWCRT1A	サイピース	レギュラー	XS	1個 31,020円 (28,200円)
JP-FWCRT2A			S	
JP-FWCRT3A			M	
JP-FWCRT4A			L	
JP-FWCRT5A			XL	

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ファローラップ クラシック
医療機器届出番号:27B1X00006651508

レッグピース、サイピースにはそれぞれライナーが付属します。

レッグピース付属ライナー



ジョブスト ファローラップ各種レッグピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、ベージュつま先あり形状、ひざ上までの長さです。(2本入り)

サイピース付属ライナー



ジョブスト ファローラップ各種サイピースに付属しています。*ライト、ストロング、クラシック共通、つま先から大腿部まで覆える長さの厚手タオル地の筒状包装です。(2本入り)

ファロー製品・同梱ライナー対照表

形状	製品 サイズ	ライナー サイズ	ライナー 周径	入り数
レッグピース 付属ライナー	XS、S	Sサイズ	15～58cm	2本
	M、L、XL	Lサイズ	52～70cm	2本
サイピース 付属ライナー	XS	Mサイズ	40～70cm	2本
	S、M、L、XL	Lサイズ	70～120cm	2本

*ライト、ストロング、クラシック共通



※写真はハイブリッドライナーを着用しています。

ジョブスト ファロークイック

40～53hPa(30～40mmHg)

- ・強めの圧迫圧
- ・スリーブと4つのベルトで簡単に装着できます。
- ・別売りのハイブリッドライナーと合わせて使用します。それにより、足先からひざ下まで圧迫ができます。
- ・ファローラップ各種のフットピース、サイピースと組み合わせて使用することが可能です。



40～53hPa(30～40mmHg) ※足首部			
製品コード	タイプ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FW4RK1	レッグピース	XS	1個 15,620円 (14,200円)
JP-FW4RK2		S	
JP-FW4RK3		M	
JP-FW4RK4		L	






一般の名称：弾性ストッキング 販売名：ジョブスト ファロークイック
医療機器届出番号：27B1X00006651307



ジョブスト ハイブリッドライナー (別売り)

- ・足先～足首間に27hPa～40hPa(20～30mmHg)の圧迫圧がかかります。
- ・ファローラップ各種と組み合わせて使用することが可能です。

製品コード	タイプ	サイズ	包装単位/袋 希望小売価格 (本体価格・税別)
JP-FLHK2	標準	S	2本 3,410円 (3,100円)
JP-FLHK3		M	
JP-FLHK4		L	
JP-FLHK5		XL	
JP-FLHK2W	ワイド	S	2本 3,410円 (3,100円)
JP-FLHK3W		M	
JP-FLHK4W		L	
JP-FLHK5W		XL	

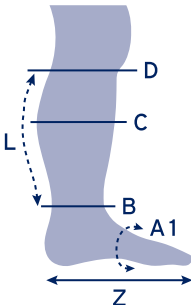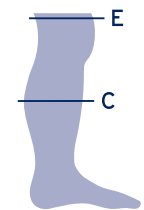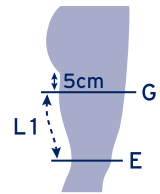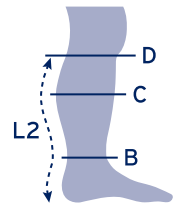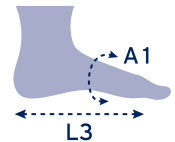

ファローラップ採寸表

フットピース

(単位：cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
レギュラー	足背周径(A1)	22－24	25－27	28－30	31－34	35－40
	踵から土踏まず前までの長さ(L3)	16－17	17－18	19－20	20－21	22－23

レッグピース

(単位：cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
レギュラー	ふくらはぎ周径(C)	36－43	42－50	48－58	53－63	58－68
	足首周径(B)	21－25	25－30	30－36	36－42	42－50
	膝下の長さ(L2)	33－37	35－39	37－41	39－43	39－43

サイピース 大腿用パーツ

(単位：cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
共通	股下周径(G)	60－70	65－75	70－80	75－90	85－100
	膝上周径(E)	47－52	53－59	60－66	67－73	74－80
ショート	膝上から股下の長さ(L1)	16－20				
レギュラー	膝上から股下の長さ(L1)	21－26				

サイピース ひざ用パーツ

(単位：cm)

	サイズ	XS	S	M	L	XL
共通	膝上周径(E)	47－52	53－59	60－66	67－73	74－80
	ふくらはぎ周径(C)	36－43	42－50	48－58	53－63	58－68

ファロークイック採寸表

(単位：cm)

サイズ	XS	S	M	L
ふくらはぎ(C)	25－38	32－48	37－56	43－67
足首(B)	17－23	19－28	25－37	29－43
足首から膝下の長さ(L)	30－33			

ハイブリッドライナー採寸表

(単位：cm)

サイズ	S	M	L	XL
ふくらはぎ周径(C)	≦60			
足長(Z)	21－24	24－26	26－28	28－31

	標準タイプ	ワイドタイプ
足周径(A1)	20－27cm	28－35cm

足周径(A1)が20－27cmは標準タイプ、28－35cmはワイドタイプをご使用ください。



弾性ストッキング
ジョブスト soソフト20・30

20 19-29hPa (14-22mmHg) 30 27-40hPa (20-30mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

ふだん使いもできる靴下風仕上げ

- ・汗を素早く吸収し、蒸散させてムレにくい素材。
- ・柔らかくて履きやすい独自の織り糸加工。

色と柄で選べる2つのスタイル



アイボリー
(チェーンストライプ柄)




ブラック
(リブ柄)

品種表		soソフト20	soソフト30
タイプ		ハイソックス	
つま先タイプ		つま先あり	
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
アイボリー	S	JP-SF20KSVC	JP-SF30KSVC
	M	JP-SF20KMVC	JP-SF30KMVC
	L	JP-SF20KLVC	JP-SF30KLVC
ブラック	S	JP-SF20KSBR	JP-SF30KSBR
	M	JP-SF20KMBR	JP-SF30KMBR
	L	JP-SF20KLBR	JP-SF30KLBR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥5,940 (¥5,400) 1足(2本)	¥7,590 (¥6,900) 1足(2本)

一般の名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト soソフト 医療機器届出番号:27B1X00006650503

採寸表

サイズ	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
	S	M	L	
ふくらはぎ(C)	28-38	30-42	32-46	
足首(B)	18-21	21-25	25-29	

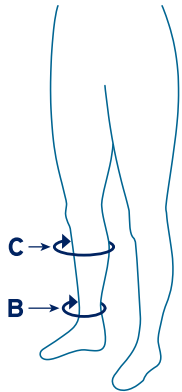

着圧ソックス
ジョブスト ライトウェア

11-20hPa (8-15mmHg)

数値は足首部の圧迫圧です。

柔らかく自然な履き心地の着圧ソックス

- ・膝下部の食い込みを防ぐため、バンドを太くゆったり編みました。
- ・吸水性が高く、快適な履き心地です。

こんな方にオススメです

圧迫力と履きやすさを求める方

立ったまま、座ったままの職業の方

筋力に不安のある方

一日中、心地よさが持続するように、足首部を最大に徐々に圧力を弱めていく段階的圧力設計を採用

ふくらはぎは足首の約 64%の圧力

足首
11~20hPa(8~15mmHg)

段階的
圧力設計
足首(最大)
20hPa
(15mmHg)

ゆったりバンド

膝下部の食い込みを防ぐため、バンドを太くゆったり編みました。

汗をしっかり吸収

吸水性が高く、快適にご使用いただけます。

品種表

タイプ		ハイソックス 男女兼用
カラー	サイズ	製品コード
ブラック	S	JP-LWS10KSBR
	M	JP-LWS10KMBR
	L	JP-LWS10KLBR
アイボリー	S	JP-LWS10KSVR
	M	JP-LWS10KMVR
	L	JP-LWS10KLVR
ホワイト	S	JP-LWS10KSWR
	M	JP-LWS10KMWR
	L	JP-LWS10KLWR
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥3,850 (¥3,500) 1足(2本)

ジョブスト ライトウェアは医療機器ではありません。

男女兼用、カラーは3色

軽い圧縮圧で脚を優しくサポート

柔らかく自然な履き心地の着圧ソックス



サイズ表

靴のサイズでお選びください。			サイズ 記入欄
S	M	L	
21.5~23.5cm	24.0~26.0cm	26.5~28.0cm	



弾性スリーブ

ジョブスト ベラ ライト アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

※前腕部

はじめてお使いの方におすすめのソフトな肌ざわり。

- ・面倒なベルト装着がなく、扱いやすい形です。
- ・S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。
- ・グローブタイプと合わせてお使いいただけます。

※アームスリーブ・グローブ 装着イメージ

品種表

		
タイプ		アームスリーブ
		手首まで
カラー	サイズ	製品コード
	S	JP-LAS2
	M	JP-LAS3
	L	JP-LAS4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥10,890 (¥9,900) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ライト 医療機器届出番号:27B1X00006652714

弾性スリーブ

ジョブスト ベラ ライト グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

※掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- ・S、M、Lの3種類のサイズが揃っています。


品種表

		
タイプ		グローブ ミトン型
カラー	サイズ	製品コード
	S	JP-LGL2
	M	JP-LGL3
	L	JP-LGL4
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥9,460 (¥8,600) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ライト 医療機器届出番号:27B1X00006652714

採寸表

	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
サイズ	S	M	L	
手首(C)	14-20	16-22	18-24	
前腕部(D)	18-23	23-29	29-34	
上端部(G)	22-40	27-45	33-51	

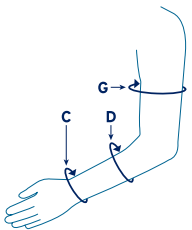

品種表

		
タイプ		アームスリーブ
		手首まで
カラー	サイズ	製品コード
	SS	JP-SAS1
	S	JP-SAS2
	M	JP-SAS3
	L	JP-SAS4
	LL	JP-SAS5
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥12,540 (¥11,400) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:27B1X00006652513

弾性スリーブ

ジョブスト ベラ ストロング グローブ

27-40hPa (20-30mmHg)

※掌部

アームスリーブと合わせて装着可能。

- ・ミトン型と指付きグローブが揃っています。
- ・指付きグローブは平編みで縫い目のないシームレスタイプです。

品種表

			
タイプ		ミトン型 グローブ	指付き グローブ
カラー	サイズ	製品コード	製品コード
	S	JP-SGL2	JP-SGF2
	M	JP-SGL3	JP-SGF3
	L	JP-SGL4	JP-SGF4
	LL		JP-SGF5
希望小売価格 (本体価格・税別)		¥9,460 (¥8,600) 1本	¥21,230 (¥19,300) 1本

一般的名称:弾性ストッキング 販売名:ジョブスト ベラ ストロング 医療機器届出番号:27B1X00006652513

弾性スリーブ

ジョブスト ベラ ストロング アームスリーブ

27-40hPa (20-30mmHg)

※前腕部


やや厚手の生地ですっかりしたフィット感。

- ・筋ポンプ作用の増強を目指し、伸びの小さい生地を採用しています。
- ・手首部分に過度な圧がかからないよう圧迫圧のピークを前腕部にしました。

※アームスリーブ・グローブ 装着イメージ

採寸表


	適用周囲長 (単位:cm)					サイズ 記入欄
サイズ	SS	S	M	L	LL	
手首(C)	14-18	14-18	14-18	17-20	19-22	
前腕部(D)	17-21	21-25	25-29	25-29	29-33	
上端部(G)	22-31	25-34	29-38	33-43	36-46	

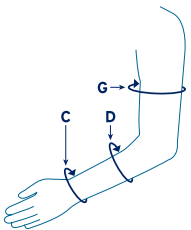

採寸表

ミトン型	適用周囲長 (単位:cm)			サイズ 記入欄
サイズ	S	M	L	
掌(B)	17-19	19-21	21-23	
手首(C)	14-18	18-21	19-22	


指付き	適用周囲長 (単位:cm)				サイズ 記入欄
サイズ	S	M	L	LL	
掌(B)	16.6-18.0	18.0-19.5	19.5-21.5	21.5-23.1	
手首(C)	16.7-18.1	17.0-18.5	17.2-18.7	18.3-20.1	

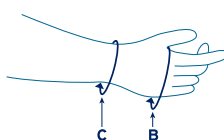

各種機能バンデージ

		サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
指包帯 (ガーゼ包帯) エラストムル 手足の指の可動に対応する設計。		4cm×4m	20ロール/箱 ¥4,840 (¥4,400)	JW-EM02094
		6cm×4m	20ロール/箱 ¥5,940 (¥5,400)	JW-EM02095
筒状包帯 トリコフィックス 汗を吸収し、皮膚を保護。 100%コットン素材で、 ソフトな肌ざわり。		6cm×20m	1ロール/箱 ¥3,740 (¥3,400)	JC-TF02195
		8cm×20m	1ロール/箱 ¥4,290 (¥3,900)	JC-TF02197
		10cm×20m	1ロール/箱 ¥4,950 (¥4,500)	JC-TF02198
		12cm×20m	1ロール/箱 ¥5,720 (¥5,200)	JC-TF02199
パディング包帯 アーティフレックス 皮膚を保護。 ウレタンフォーム等の固定。		10cm×3m	30ロール/箱 ¥22,770 (¥20,700)	JC-AF09046
		15cm×3m	20ロール/箱 ¥20,680 (¥18,800)	JC-AF09047
低伸縮弾性包帯 コンプリラン 運動時の高圧迫力と静止時の 低圧迫力を可能にする ショートストレッチ包帯。		6cm×5m	1ロール/箱 ¥1,210 (¥1,100)	JP-CR01026
		8cm×5m	1ロール/箱 ¥1,650 (¥1,500)	JP-CR01027
		10cm×5m	1ロール/箱 ¥1,980 (¥1,800)	JP-CR01028
		12cm×5m	1ロール/箱 ¥2,310 (¥2,100)	JP-CR01029
バンデージ固定包帯 イデアルビンデ 下肢の各バンデージ類を固定時に使用。		20cm×5m	6ロール/箱 ¥13,200 (¥12,000)	JC-IB01959
ウレタンロール コンプリフォーム 皮膚を保護し、バンデージの 圧力を均一に分散。		10cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,530 (¥2,300)	JC-CF75294
		12cm×2.5m	1ロール/箱 ¥2,860 (¥2,600)	JC-CF75295
低伸テープ  ラテックス含有 テンソプラスト 剥がれにくく、患部をしっかりと固定 適度な伸縮性があります。		5cm×4.5m	12ロール/箱 ¥14,520 (¥13,200)	JW-ET7 20532
		7.5cm×4.5m	12ロール/箱 ¥21,120 (¥19,200)	JW-ET7 20536
		10cm×4.5m	12ロール/箱 ¥27,720 (¥25,200)	JW-ET7 20529

*伸ばした状態での長さになります。

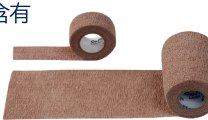		サイズ*	希望小売価格 (本体価格・税別)	製品コード
筒状包帯 デルタ テリーネットS チューブ状で衣類のように 装着可能。 タオル地のような肌触り。		5cm×13.5m	1本/箱 ¥9,020 (¥8,200)	JC-TN050
		7.5cm×13.5m	1本/箱 ¥11,660 (¥10,600)	JC-TN075
		10cm×13.5m	1本/箱 ¥15,950 (¥14,500)	JC-TN100
		12.5cm×13.5m	1本/箱 ¥19,360 (¥17,600)	JC-TN125
		15cm×13.5m	1本/箱 ¥23,320 (¥21,200)	JC-TN150
筒状包帯  ラテックス含有 テンソグリップ 軽度の伸縮性がある チューブ状の包帯なので、 衣類のように履くだけで装着が可能。		7.5cm×10m	1本/箱 ¥7,810 (¥7,100)	JC-TG0750
		8.75cm×10m	1本/箱 ¥8,140 (¥7,400)	JC-TG0875
		10cm×10m	1本/箱 ¥8,580 (¥7,800)	JC-TG1000
		12cm×10m	1本/箱 ¥11,660 (¥10,600)	JC-TG1200
		17.5cm×10m	1本/箱 ¥14,740 (¥13,400)	JC-TG1750
自着性高圧迫力弾性包帯 コンプリハフト 運動時の高圧迫力と静止時の 低圧迫力を可能にする ショートストレッチ包帯。 包帯同士が互いにくっつく自着性が あり、ずれやゆるみがおきにくい。		8cm×5m	1ロール/箱 ¥2,310 (¥2,100)	JP-CH45958
		10cm×5m	1ロール/箱 ¥2,640 (¥2,400)	JP-CH45959
自着性不織布弾性包帯  ラテックス含有 コープラス ナイロン不織布と弾力糸から成る 自着性弾力包帯。 包帯同士が互いにくっつく自着性が あり、ずれやゆるみがおきにくい。		2.5cm×3.0m	60ロール/箱 ¥44,220 (¥40,200)	JW-CP721006
		5.0cm×3.0m	36ロール/箱 ¥39,600 (¥36,000)	JW-CP721008
		7.5cm×3.0m	24ロール/箱 ¥34,320 (¥31,200)	JW-CP721009
		10.0cm×3.0m	18ロール/箱 ¥33,660 (¥30,600)	JW-CP721004

*伸ばした状態での長さになります。

インジケーター付き2層バンテージキット コンプリ2 パッティング包帯と自着性のショートストレッチ バンテージをキット化した2層バンテージキット。 	10cm×5.5m 10cm×3.5m	1箱	¥3,960 (¥3,600)	JP-CW1055
	10cm×7.5m 10cm×5.2m	1箱	¥5,060 (¥4,600)	JP-CW1075
*上段:ショートストレッチバンデージ 下段:パッティング包帯のサイズです ※1:足首周径 18-25cm ※2:足首周径 25-32cm				

*伸ばした状態での長さになります。 コンプリ2の使用方法是ホームページ内パンフレットをご覧ください。 <https://www.kawamoto-sangyo.co.jp/catalog/catalog2/>

弾性ストッキング着用補助具 ジョブスト ストッキング ドナー 履きやすい、履かせやすい、 弾性ストッキング着用補助具		1台	¥4,730 (¥4,300)	JP-SD110913
---	---	----	---------------------------	-------------