

鏡視下手術用ガーゼ

GGアブソーテックプラス

一般医療機器

届出番号：27B1X00006553624


販売名：GGアブソーテック

EOG
STERILE


鏡視下でのハレーションを低減

リニューアル

従来品よりもX線透過装置で
撮影時、視認性が向上しました

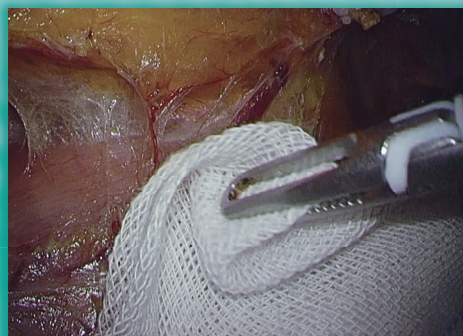

通常白色ガーゼ使用時

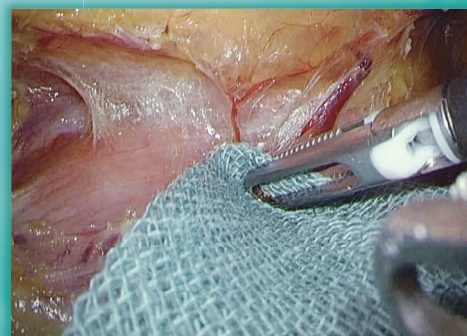

GGアブソーテック®使用時

〈 画像提供：大阪赤十字病院 第二消化器外科 部長 金谷誠一郎先生 〉

医療従事者向け

特 長

●ハレーションを低減

緑色に着色しているので、ハレーションが起きにくく、クリアな視界で手術が可能です。

●優れた操作性

トロカールからの挿入・抜去や体腔内での操作が容易な三角形です。
また、厚みがあるので臓器を愛護的に圧排できます。

●吸液時に臓器との判別が容易


緑色に着色しているので、血液を吸液しても臓器との判別が容易です。

●内径12mm以上のトロカールから挿入・抜去が可能


●X線透過装置で撮影時、判別が容易

従来品よりも視認性が向上しました。

● X線撮影画像

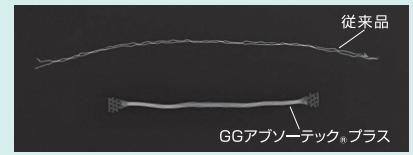


X線で写りにくい部分でも鮮明に写り、
視認性が向上しました。

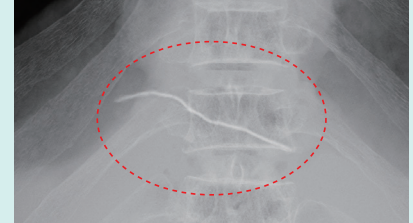


製品仕様

材質：本体（綿100%）、X線造影系（ポリプロピレン・ポリエステル・硫酸バリウム・青色顔料）

S

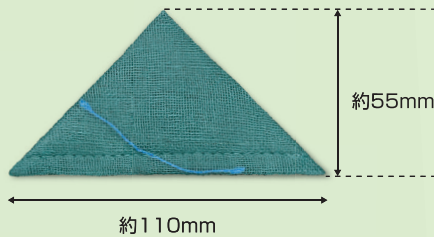

M

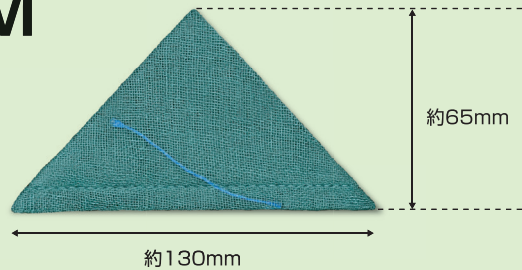

コードNo.	品名	種類	包装	ケース 入数	高さ×幅×奥行き(単位mm) 重量	JANコード
021-415210-00	GGアブソーテック®プラス	S	2枚/袋×20袋/箱	4箱	内箱 102×262×170 約200g	4 987601 519802
ケース 216×269×350 約1.10kg						
021-415211-00		5枚/袋×20袋/箱	4箱	内箱 102×262×170 約250g	4 987601 519819	
ケース 216×269×350 約1.30kg						
021-415220-00	GGアブソーテック®プラス	M	2枚/袋×20袋/箱	4箱	内箱 102×262×170 約210g	4 987601 519826
ケース 216×269×350 約1.20kg						
021-415221-00		5枚/袋×20袋/箱	4箱	内箱 102×262×170 約280g	4 987601 519833	
ケース 216×269×350 約1.40kg						

※ 製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

● お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)

http://www.kawamoto-sangyo.co.jp

メディカル営業本部 東日本 03(6666)6134 中日本 052(522)3371 近畿 06(6943)8213
(東京) (名古屋) (本社)

西日本 082(222)3501 西日本 092(475)1381
(広島) (福岡)

●ご注文・お問い合わせは